

karma 康揚

好的輪椅，好在適配！

康揚股份有限公司

台灣・嘉義縣民雄鄉大學路二段2363號

T 05-206 6688 F 05-206 6699

www.karma.com.tw



廣字第10107003號
衛署醫器製字第001527號
衛署醫器輸壹字第004939號

・本公司保有修改型錄內產品之權利，恕不另作通知・104-405A9 Rev.00 DEC 2012

karma 康揚

好的輪椅，好在適配！



舒弧125



人體工學 舒適移位

適用補助申請

輪椅-B款（輕量化量產型）、輪椅附加功能-A款（具利於移位功能）



可掀式扶手結構

後掀結構設計，方便側向活動，如：移位至椅子、車上...等，便利生活！



可拆卸式腳靠結構

可向內、向外旋轉，在狹小空間內也可以輕鬆操作，免工具快拆的靠腳設計，方便移位至床上、車上...，且收藏體積小、不佔空間。



S曲面型人體工學座墊系統


- 有效分散重量，減少臀部壓力
- 行進時穩定坐姿，降低臀部潛滑
- 減緩褥瘡和脊椎側彎發生的風險



一般輪椅座墊


HOW DOES IT WORK?

壓力集中於臀骨部位，壓力區呈現紅色高壓狀態，容易引發褥瘡。

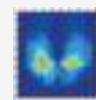

S 曲面型座墊

有效分散承重的支撐面積，壓力區呈現舒適的低壓狀態，同時達到、穩姿、防滑等機能，減緩褥瘡產生。

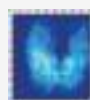

aegis 抗菌防霉處理

座 / 背墊、車體烤漆都經過 aegis 抗菌防霉處理，預防感染！



舒跑輪手扶圈

符合人體工學的模組設計，握感舒適，轉動靈活，操控更省力。



外擴式扶手結構

根據人體工學加大乘坐空間，使雙肘舒適擺放。



冬夏兩用座背墊

車工精細紮實、材質透氣舒適，不論裝置或拆卸，都十分便利，讓您冬暖夏涼～

輕量化骨架材質設計

二截式骨盆帶

型號	座寬	前/後輪 F/R wheels												安全載重 Max. User Weight
舒弧 125	16"	7"x24"	40	43	58	31	21	99	50	41	91	14.3kg	115kg	
	18"	7"x24"	45	43	63	31	21	99	50	41	91	14.5kg	115kg	

顏色尺寸依現貨為準 ±1cm ±0.5KG