

# karma 康揚

好的輪椅，好在適配！

## karma 康揚

好的輪椅，好在適配！

康揚股份有限公司

台灣·嘉義縣民雄鄉大學路二段2363號

T 05-206 6688 F 05-206 6699

[www.karma.com.tw](http://www.karma.com.tw)



(圖為部分選配)

## KM-AT20

靈活輕巧、操控性極佳

CE   ISO 9001

廣字第10107006號  
衛署醫器製字第001527號

· 本公司保有修改型錄內產品之權利，恕不另作通知 · 104-405B1 Rev.00 Dec 2012

適用補助申請  
高活動型輪椅

# KM-AT20



## 調整式背墊

可依體型調整各部位不同的支撐度，也可避免布料彈性疲乏後，發生吊床現象。造成能安定坐姿不變形、避免駝背或脊椎側彎發生。



## 手推輪組之外展角度

依使用者需求設定，0°、3°、5°



## 連動式踏板

隨著輪椅攤開、收合，操作便利。



## 快拆後輪與收合

超輕量化設計、全車僅重11.5kg。儲放空間極小。

## 可調整多種功能以符合個人選擇

後輪軸心  
共分三段每段26mm

座高  
共分三段18.5"~21" (含上墊)  
每段1/2英吋

扶手  
共分三段7"~9"每段1英吋

小腿長  
共分五段14"~18"  
每段1英吋


背高  
可分三種  
標準高9.5"/11.5"/13.5"、  
每種標準高均可分五段  
微調每段1/2英吋

踏板角度  
原角度11度，提供15度範圍內無段式微調功能  
(71.5~86.5度)

## 選購配件



扶手  
方便減壓動作

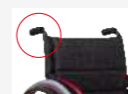

升降輔推把手  
(限制於最低背高時使用)



輪組  
舒跑輪、鋼絲輪、  
輕量輪、鎂合金輪



5cm泡棉座上墊



反撐桿



VICAIR氣墊座



置物網袋



背袋



KM-CS31  
浮雲三代減壓墊



PVC骨盆帶

型號	座寬	前/後輪 F/R wheels												安全載重 Max. User Weight
KM-AT20	13"~16"	5"x24"Q	33~41	36~40	座寬+24	38	26	84	36~41	31/48	特製	11.5kg	100kg	
顏色尺寸依現貨為準													±1cm	±0.5KG