

7. 除外情況－不適用站立式輪椅


- 7-1. 髖關節已受限，無法舒展。
- 7-2. 嚴重姿勢性低血壓。
- 7-3. 下肢關節問題(人工關節手術後恢復期、關節不穩、關節攣縮)。
- 7-4. 嚴重下肢骨質疏鬆症。
- 7-5. 嚴重異常反射且無法經訓練減緩症狀。

8. 注意事項

- 8-1. 本產品必須由治療師評估始可選購。
- 8-2. 第一次使用請以分段升起方式進行，讓久坐的身體慢慢習慣姿勢的變換，避免導致激烈的神經反射，建議由治療師或專業技師指導、操作，讓乘坐者安心地享受站起來的喜悅。
- 8-3. 透過臨床使用 2~3 次的追蹤微調，能夠發揮最大的功效。
- 8-4. 在戶外使用，請避免於站立功能啟用時進行行駛，以防顛簸、傾倒。
- 8-5. 上述調整功能皆須使用工具進行，請尋求治療師或專業技師協助，進行調整。



規格表

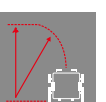±1cm ±0.5kg			
			
62	100	44	80°~120°
			
MOTOR W	電池		
300Wx2	50Ahx2	97.5	62
			
6°	時速 9km	28km	135kg
			
含電池 重 量	不含電池 重 量		
86kg	55kg		

▶ 以上環境條件為：溫度20°~35°、全新電池
且充飽電、平坦道路、80kg 標稱載重

※本公司保有修改內容之權利，如有疑問，請與康揚聯絡

抬頭挺胸站起來 全新視界為您開！

找回遺失的行動力，
活動更自主・視野更寬闊



兜風站

KP-80 電動站立式輪椅
POWER STANDING WHEELCHAIR



適用族群：

1. 介護者無法定時協助減壓活動者
2. 無法受到全天候介護協助、必須自主安排生活起居者
3. 期望藉由站立改善三大循環系統並減緩機能退化者
4. 具有定期進行站立訓練需求者

※產品照片僅供參考，以實物為準

1. 符合人體工學 S-Ergo 服貼身型

兜風站II 站立式電動輪椅，獨家搭載專利S-Ergo人體工學座墊系統，特殊的S型座墊管具有均壓、擺位及防止潛滑的功效，有效防止褥瘡以及脊椎側彎的發生，提供使用者絕佳的舒適乘坐感受！

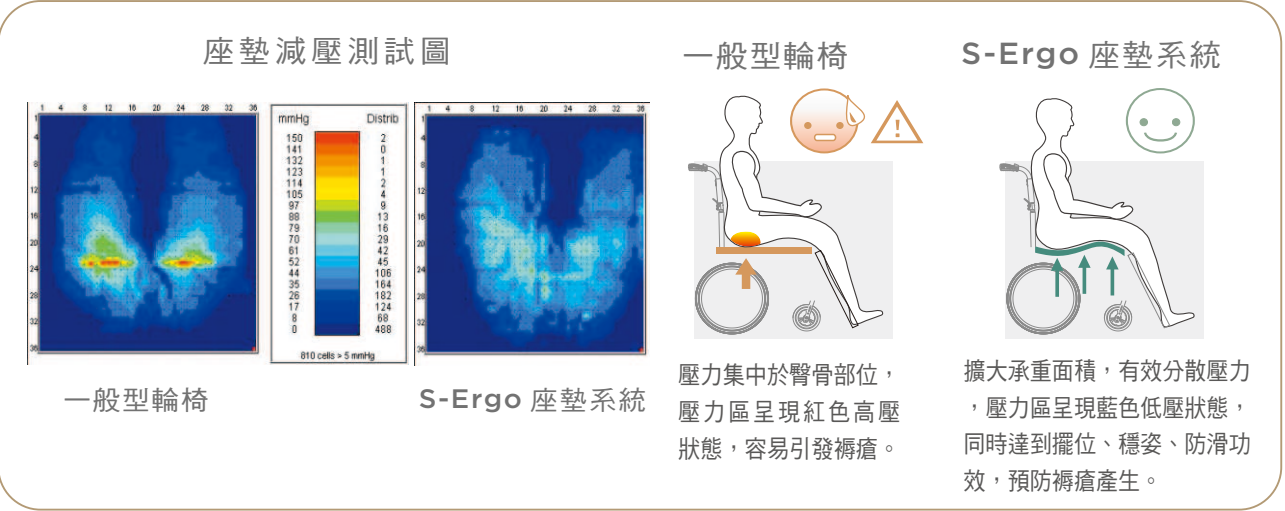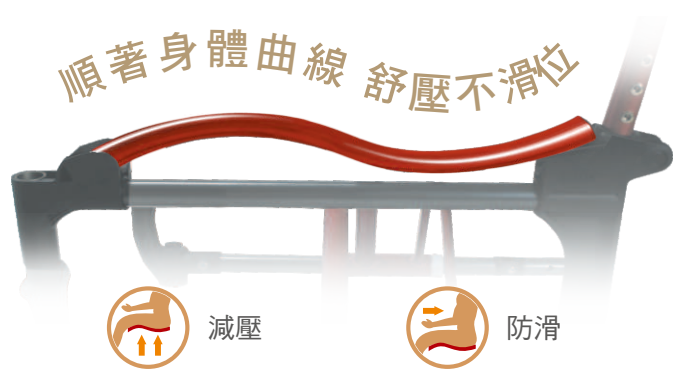

2. 前輪驅動設計 自在悠遊前行

3. 最輕量的車身、最流線的造型

4. 最多選擇組合

兜風站II 先進的機構設計，擁有高度可調的特性，能依照治療師的診斷進行適型調整

4-1. 電動背墊角度

4-1-1. 角度無段可調

4-1-2. 負角度(80°)設計

4-2. 座寬、座深

4-3. 人因扶手

4-4. 頂膝

4-5. 踏板



5. 其他功能及特性

5-1. 控制器平行位移機構：可上、下、前、後、平行無段調整控制器，創造最佳操控姿勢與零干涉進出座椅，滿足各種使用習慣以及操控需求；左、右兩型固定座可供選購。



5-2. 座背墊防火材質：符合歐洲安全規範，安全升級。

5-3. 標配安全帶：防止站立時身體前傾造成危險，兩個固定位置可選，方便使用。

5-4. 推手握把：可依照個人推行方式及使用環境，選擇最省力的握法。

5-5. 搭載50Ah電池。

5-6. 選購：

- a.外掛式頭靠
- b.擋泥板
- c.輔助剎車
- d.鋁合金輪圈

6. 站立的健康價值

改善長時間維持坐姿所產生的後遺症，有效促進三大循環系統的機能，維持身心健康：

- 6-1. 減緩腿部骨質疏鬆、肌肉萎縮退化
- 6-2. 肌肉纖維化、關節僵直
- 6-3. 神經異常放電
- 6-4. 褥瘡
- 6-5. 壓胸
- 6-6. 下肢水腫
- 6-7. 姿勢性低血壓
- 6-8. 頻尿或排尿不易

