

**karma 康揚**

好的輪椅，好在適配！

康揚股份有限公司

台灣·嘉義縣民雄鄉大學路二段2363號

T 05-206 6688 F 05-206 6699

[www.karma.com.tw](http://www.karma.com.tw)



衛部器廣字第10505043號  
衛署醫器輸壹字第004939號  
衛署醫器陸輸壹字第001563號

· 本公司保有修改型錄內產品之權利，恕不另作通知 · 11150100061 Rev.02 Mar. 2017

**karma 康揚**

好的輪椅，好在適配！



台灣精品金質獎  
2014

**仰樂多 515**

零重力空中傾倒 減壓穩姿沒煩惱



適用補助申請

輪椅-B款（輕量化量產型）、輪椅附加功能-A款（具利於移位功能）、輪椅附加功能-C款（具空中傾倒功能）


# 仰樂多 515



## 更安穩 更輕鬆

●表重心位置

空中傾倒時重心潛移於前後輪之間達到穩定減壓效果。

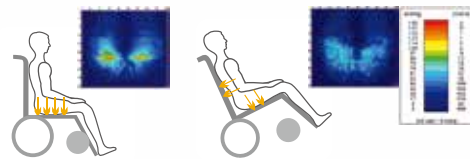

一般輪椅

仰樂多515

一般輪椅壓力集中於臀部位置，容易引發褥瘡。而挺仰0-35度，能有效分散承量，壓力區呈現舒適低壓狀態。

## 人體工學科技

可調高低、升級人體工學頭枕設計，有利於頭部正確擺位、肩頸釋壓放鬆。



## 多功能扶手

扶手可後掀及高低可調。



設計更貼心、方便乘坐者移位。

## 可拆式撥腳



## 收合好便利

國內唯一！  
背管可後折的收合式空中傾倒型輪椅，攜帶便利。



## 冬夏兩用 座背墊

冬暖夏涼超舒適。



上升輔推



下躺減震

## 「超級動力棒」減壓挺仰系統

創新研發「超級動力棒」氣壓式空中傾倒系統，不僅上升可輔推、下躺能減震，並可明顯增強下躺時減壓機能的穩定性！

## 標準配備

- 標配安全骨盆帶、胸帶
- 輕量鋁合金骨架
- 抗菌防霉處理
- 安全反撐桿
- 椅背仰躺功能

## 多樣配件可加價選購



硬式底板



腳掌帶、腳跟擋帶



可換置升撥腳



大腿環帶、小腿環帶



VICAIR氣墊座

氧氣桶架  
點滴架

型號	座寬	前/後輪 F/R wheels										安全載重 Max. User Weight	
仰樂多 515	16"	7"-14"	40	42	62	34	23-29	108	49	45	134-99 (無頭枕)	18.9kg	115kg
	18"	7"-20"	45	42	67	38	23-29	108	49	45	134-99 (無頭枕)	19.1kg	115kg

顏色尺寸依現貨為準 ±1cm ±0.5kg