

40度仰躺+45度空中傾倒 紓壓二合一




空中傾倒45度 變換姿勢，減輕臀壓

透過空中傾倒轉換乘坐時的臀部壓力位置，達到放鬆紓壓的效果，在姿勢變換時維持坐姿擺位，讓孩子可以放鬆休息。



仰躺40度 伸展關節，減輕壓力

後躺能舒緩乘坐時的壓力，有利於減輕關節壓力，便利護理。
*若搭配動態背靠，仰躺角度可達45度

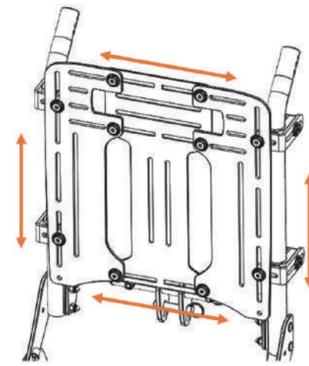

氣壓靜平衡座椅技術

讓座椅在姿勢變換過程保持和緩，溫柔進行。不會瞬間頓挫、驚醒熟睡時的孩童，提供乘坐者高度的安全感。

成長調整型座椅


固定式底盤，搭配可調式座椅系統，隨乘坐者身形需求調整。

- 5種座椅寬度
- 9種座椅深度
- 3種座椅高度
- 後背高度無段式調整從14吋至20吋

專利

張力保護系統-動態背靠

康揚研發團隊與治療師共同設計的創新技術，根據乘坐者體重提供三種緩衝彈性。只需要一個簡單開關，可有效協助高張力的兒童減緩張力來臨時的身體衝擊，避免受傷，照護者心安。提高乘坐舒適度，也保障乘坐者的安全。

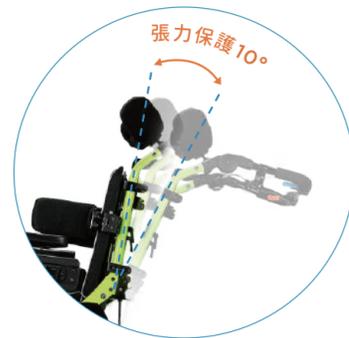

karma 康揚

好的輪椅，好在適配！

透過提供適配行動輔具，豐富所有行動不便者家庭的日常生活是我們從創立以來的使命。康揚產品銷售遍及全球5大洲40餘國，為客戶提供有溫度與效率的服務。我們的產品設計研發由台灣與荷蘭跨國團隊攜手合作，連連榮獲國內外多項設計獎肯定，並通過ISO7176與英國Crash Test安全認證。全台16間專業授權維修中心與原廠客服技師支援，品質安心有保障，成為您最值得信賴的輪椅品牌。

康揚客製團隊

康揚客製團隊專精於擺位型產品，以豐富所有行動不便者日常生活為使命，投入擺位型輪椅的研發與生產歷經數十年，從KM-CP33擺位型特製輪椅到Kameleon變色龍電動輪椅，2022年更升級推出Flexx Adapt擺變袋鼠，為擺位輪椅架構更完整的產品線。

我們由物理治療師與職能治療師直接提供高規格第一線診斷與適配服務；開闢獨立專業產線，以超過30年工藝經驗的工程技師團隊為每位特別需求者製作與修改專屬的行動輔具與配件。每一個透過康揚客製承接的需求都被我們用心承接、專業打造，只為了能提供給您，更獨立，更自主的行動能力以及乘坐體驗。



康揚股份有限公司 嘉義縣民雄鄉大學路二段2363號 05-206 6688 www.karma.com.tw
康揚 手動輪椅(未滅菌) 衛署醫器製壹字第001527號 衛部器廣字第11105028號 Ver.00 July 2022



flexx adapt 擺變袋鼠

調整多一點，呵護多一點

跟著兒童成長身形調整變化
輕鬆搭配多元擺位配件
穩姿擺位，守護成長！



karma 康揚

The Dartex® Performance 醫療布料

有效導出熱氣，舒適不悶熱。



穩姿擺位設計

前高後低座墊，協助穩姿，讓孩子坐好坐穩，參與課堂活動，融入群體。

四向可調踏板

腳踏板有四方位與角度可以進行調整，讓腳掌擺放位置到位，提供更好的擺位體驗。

外擴型撥腳設計

促進骨盆維持正中、避免骨盆後傾及坐姿下滑，達到更好的擺位姿勢。



照護者友善設計

橫向推把可以因應不同身高的照護者調整操作角度，也利於仰躺與空中傾倒時的推行，讓其無須彎腰即可掌握。

高相容性座椅系統

背板滑槽設計與側車身的滑軌技術便利加裝不同頭靠、扶手、軀幹/臀/膝外支撐與骨盆帶，配件選擇更多元！

鼓煞剎車系統

力道好控制，結構相對駐車剎安全。



便利收納與運輸

收折骨架，置於後車廂，便利運輸(快拆後輪可取下)。

*測試收納容量使用的車型：Toyota Yaris



通過嚴格測試 安全穩固

通過國際交通撞擊測試把關，品質穩固值得信賴，大幅提升乘坐者搭運輸工具時的安全性。

選購配件

| 頭靠系統 | | 張力保護系統 | | 扶手系統 | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-----|--|
| | | | | | | | |
| 曲型頭枕 | 調整式頭枕 | 動態背靠開關 | 標配 人因扶手墊 | 寬版扶手墊 | 短木扶手墊 | | |
| 軀幹系統 | | 臀/膝側支撐 | | 膝內支撐 | | 防傾桿 | |
| | | | | | | | |
| 垂直調整軀幹側支撐 | 多向調整軀幹側支撐 | 標配 單墊多向調整 | 雙墊多向調整 | 膝內支撐 | 標配 防傾桿 | | |
| 腳靠系統 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 90°垂直式撥腳 | 標配 80°標準式撥腳 | 展軸升撥腳 | 標配 四向調整踏板-塑膠 | 四向調整踏板-鋁 | 小腿靠墊 | | |
| 固定帶系列 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 一字型胸帶 | H型胸帶 | SL兩點式雙環調整骨盆帶(塑膠扣) | SL四點式骨盆帶(塑膠扣) | 骨盆帶(金屬扣) | 一字型骨盆帶(PVC) | | |
| | | | | | | | |
| 肩導帶板 | 大腿固定帶 | 小腿靠帶 | 固定帶(前臀、小腿) | 腳掌固定帶 | 腳跟帶 | | |
| 剎車 | | 配件 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 標配 後輪鼓剎含駐車按鈕(介護型) | 備用剎車(推式駐車剎) | 背板掛勾 | 點滴架 | 木桌板(側掀式/黏帶式) | | | |

規格

適用補助 輪椅C款 附加功能A+B+C 擺位A+C+D

| | 最小值 | 最大值 |
|--------------|----------|----------|
| 宣稱座寬(in)* | 255 / 10 | 355 / 14 |
| 宣稱座深(mm)** | 230 / 9 | 380 / 15 |
| 前輪/後輪尺寸(in) | 6 / 16 | 8 / 16 |
| 背高不含座墊(mm) | 400 | 550 |
| 背高含座墊(mm) | 350 | 500 |
| 背高含頭靠(mm) | 360 | 690 |
| 扶手高不含座墊(mm) | 75 | 295 |
| 扶手高含座墊(mm) | 10 | 230 |
| 扶手結構前端位置(mm) | 0 | 460 |
| 前座高不含座墊(mm) | 430 | 480 |
| 前座高含座墊(mm) | 480 | 530 |
| 腳靠長不含座墊(mm) | 85 | 285 |
| 腳靠長含座墊(mm) | 160 | 360 |
| 有效座寬(mm) | 290 | 390 |
| 有效座深(mm) | 285 | 410 |
| 座墊角度(X°) | 0 | 45 |
| 背墊角度(X°) | 0 | 40 |
| 座背墊夾角角度(X°) | 90 | 130 |
| 腳靠與座墊間角度(X°) | 100 | - |
| 總長(mm) | 1070 | 1385 |
| 總寬(mm) | 570 | - |
| 總高(mm) | 1060 | 1190 |
| 收合總長(mm) | 770 | - |
| 收合總寬(mm) | 570 | - |
| 收合總高(mm) | 530 | - |
| 總重(kg) | 29.8 | - |
| 單件最重(kg) | 18.6 | - |
| 最大載重(kg) | - | 75 |
| 最小迴轉半徑(mm) | 940 | - |
| 輪椅最小迴轉半徑(mm) | 850 | - |

* 宣稱座寬為量測椅墊前方120mm處的座墊寬度，此數值主要用於產品的訂購流程。

** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離，此數值主要用於產品的訂購流程。

- 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。

- 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。

- 康揚原廠保有修改產品規格之權利，實際配備以出廠之產品為主；若表格內數據與實際產品有所差異，請以實際產品為主。



APPLE GREEN 蘋果綠

PINK 紅梅粉

FLAT BLACK 平光黑